МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

МЕДИТЕК «Знамя Труда» - Крупнейший Российский производитель медицинского оборудования с более чем 20 летней историей.



Установки для обезвреживания медицинских отходов «БАЛТНЕР®»



Паровые стерилизаторы вертикальные и горизонтальные «БАЛТСТЕР®»



Низкотемпературные плазменные стерилизаторы «БАЛТСТЕР®»



Дезинфекционно-моечные машины «БАЛТКЛЕР®»

МЫ ЛИДЕРЫ РОССИИ

БОЛЕЕ 5000 ПОСТАВОК

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

«МЕДИТЕК «Знамя Труда» - это крупнейшая Российская медицинская производственная компания. Более 5 000 лечебных учреждений используют производимое нами медицинское оборудование в повседневной практике. С 2006 года мы занимаемся разработкой, производством и внедрением в практику инновационного медицинского оборудования и современных медицинских расходных материалов.

НАША МИССИЯ:
Экологичный мир за счет оснащения ЛПУ доступным оборудованием для переработки медицинских отходов. Безопасность пациентов и персонала ЛПУ за счет уничтожения инфекций посредством оснащения лечебных учреждений доступным и высокотехнологичным медицинским оборудованием для дезинфекции и стерилизации.

НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®»

В 2003 году мы разработали, запатентовали, начали производство и активное внедрение в повседневную практику ЛПУ установок «БАЛТНЕР®» для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В.
На сегодняшний день мы являемся лидерами в России по количеству эксплуатируемого в медицинских учреждениях оборудования. Широкий модельный ряд оборудования, высокое качество и доступная цена позволяет переработать медицинские отходы в лечебных учреждениях любой мощности, профиля и бюджета.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ «БАЛТСТЕР®»

Разработанные, запатентованные и производимые нами стерилизаторы «БАЛТСТЕР®» – это высокотехнологичное современное оборудование, выполняющее стерилизацию и сушку с вакуумированием в автоматическом режиме. Стерилизаторы «БАЛТСТЕР®» позволяют эффективно организовать процесс стерилизации в ЛПУ любого размера, профиля и бюджета, обеспечивая тем самым защиту пациентов и медицинского персонала от внутрибольничных инфекций.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ «БАЛТСТЕР®»

Производимые нами плазменные стерилизаторы «БАЛТСТЕР®» являются высокоэффективным и доступным решением для стерилизации широкого спектра термолабильных инструментов и материалов используемых в ЛПУ, таких как: оптические медицинские системы, электрические кабели, жесткие и гибкие эндоскопы, ультразвуковые медицинские инструменты, датчики, импланты и инструменты для их установки.

ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ «БАЛТКЛЕР®»

Машины дезинфекционно-моечные «БАЛТКЛЕР®» обеспечивают бережную обработку и высококачественную очистку медицинских изделий, удобство работы для персонала и экономию бюджетных средств лечебного учреждения. Оборудование «БАЛТКЛЕР®», является неотъемлемой частью любого современного центрального стерилизационного отделения (ЦСО) больницы за счет доступной цены и высочайшего качества оборудования.

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И УЧАСТКИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

Мы производим модульные здания ЦСО «БАЛТСТЕР®» и участок по обращению с медицинскими отходами «БАЛТНЕР®». Наши модульные здания – это созданные нами типовые проекты Центрального стерилизационного отделения и участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В для лечебных учреждений с ограниченной площадью, цена которых сопоставима с затратами учреждения на ремонт существующих помещений.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

Мы производим уникальные расходные материалы для обращения с медицинскими отходами. Благодаря значительному опыту работы с больничными отходами наш широкий ассортимент расходных материалов отвечает всем потребностям ЛПУ, идеально подходит для технологии «БАЛТНЕР®» и имеет отличное соотношение цены и качества.

МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ХИРУРГИИ

Мы предоставляем широкий выбор инфузионных систем и катетеров, современного перевязочного материала, лечебно-профилактических повязок, расходных материалов для респираторной поддержки, зондов и катетеров для анестезиологии, реанимации и хирургии. Основополагающими критериями нашей продукции являются высокое качество, доступная цена, инновационные разработки компании и постоянное расширение ассортимента в соответствии с потребностями рынка.

ШКАФЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

Разработанные нами шкафы водоподготовки и водоочистки для медицинских автоклавов и дезинфекционно-моечных машин поддерживают эффективность технологического процесса, обеспечивают надёжность и продлевают срок эксплуатации оборудования.

Вспомогательные ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЦСО

Производимые нами вспомогательные ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЦСО значительно оптимизируют процессы обработки инструментов, материалов и поверхностей. Они включают в себя тележки, корзины, биксы, стойки для мойки и другие предметы.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Осуществляет комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники по всей номенклатуре на территории России и ближнего зарубежья. Техническое обслуживание проводится в соответствии с Государственными стандартами и нормативными техническими регламентами.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Выпускаемые компанией «МЕДИТЕК «Знамя Труда» установки для обезвреживания медицинских отходов «БАЛТНЕР®» за 20 лет стали самой используемой технологией в повседневной практике ЛПУ России и стран СНГ, также их используют во многих клиниках европейского союза.
Нами было введено в эксплуатацию более 5000 установок «БАЛТНЕР®», как в рамках централизованного оснащения регионов, так и в рамках децентрализованного оснащения ЛПУ.

Технология «БАЛТНЕР®» полностью отвечает российским и международным требованиям по обращению с медицинскими отходами классов Б и В, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21, а так же установлено соответствие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, что подтверждено положительным заключением государственной экологической экспертизы. Оптимальное соотношение цены и качества позволило нашим установкам по праву занять лидирующие позиции в России.

УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®» - ЭТО:

САМАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РОССИИ

За 20 лет было введено в эксплуатацию более 5000 тысяч установок «БАЛТНЕР®», как в рамках централизованного оснащения, результатом чего стало полное уничтожение медицинских отходов в некоторых регионах, так и в рамках децентрализованного оснащения ЛПУ, результатом чего является полное обезвреживание медицинских отходов лечебными учреждениями.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПОЛУЧИВШАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Технология «БАЛТНЕР®» прошла Государственную экологическую экспертизу и получила положительное Заключение экспертной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РОСПРИРОДНАДЗОРА. Экологическая экспертиза проведена в соответствии
с Федеральным законом от 23.11.1995 No 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Стоимость оборудования позволяет осуществлять закупку установки для обезвреживания медицинских отходов «БАЛТНЕР®» любым ЛПУ вне зависимости от их финансирования.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

На протяжении многих лет мы уверенно занимаем лидирующие позиции в России. Помимо всех разрешительных документов в РФ, мы получили CE сертификаты, которые подтверждают соответствие нашей продукции стандартам Европейского союза.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Установки «БАЛТНЕР®» имеют низкие эксплуатационные затраты, ввиду отсутствия необходимости в расходных материалах, дезинфектантах, низкого потребления электричества и воды.
В результате экономия бюджетных средств на обращение с медицинскими отходами составляет порядка 90%. Срок окупаемости установок от четырёх месяцев.

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интуитивно понятный интерфейс, минимальное количество манипуляций оператором
при эксплуатации, отсутствие необходимости в сортировке отходов перед проведением цикла.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Помещение должно быть подготовлено в соответствии с требованиями санитарных правил п.211 СанПиН 2.1.3684-21. Дополнительные требования для размещения установок «БАЛТНЕР®», необходимо только подвести электричество.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Позволяет осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинской техники отечественного и импортного производства для поддержания в исправном состоянии оборудования при его эксплуатации. Специалисты сервисного центра в режиме 24/7 готовы оказать поддержку покупателям и пользователям оборудования.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®II»

Данное оборудование предназначено для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В физическим методом обеззараживания (дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума) и деструкцией, путем прессования в механическом прессе.

Оборудование «БАЛТНЕР®II» оптимально подходит для:

БАЛТНЕР®II-15 - лабораторий, участковых поликлиник, частных медицинских центров.
БАЛТНЕР®II-30 - небольших ЛПУ таких, как поликлиники, женские консультации, санатории и профилактории, диспансеры разного профиля, дома инвалидов.
БАЛТНЕР®II-50 - стационаров и крупных диспансеров.
БАЛТНЕР®II-100 - крупных стационаров, инфекционных ЛПУ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТНЕР®II»				
Наименование	**БАЛТНЕР®II-15**	**БАЛТНЕР®II-30**	**БАЛТНЕР®II-50**	**БАЛТНЕР®II-100**
Объем загрузочной камеры	15 л.	30 л.	50 л.	100 л (2 шт. по 50 л.)
Производительность	30 л/ч (4 кг/ч)	60 л/ч (8 кг/ч)	100 л/ч (12 кг/ч)	200 л/ч (24 кг/ч)
Время цикла дезинфекции	30 мин			
Регистрация цикла дезинфекции	Двойной чек на липкой ленте			
Давление при прессовании	10 тонн			

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «БАЛТНЕР®II»:

• Автоклавирование – это единственный метод, не имеющий недостатков. Рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как наиболее эффективный и надёжный. Признан предпочтительным методом на уровне международных стандартов (ЮНЕП 2003). Метод автоклавирования с деструкцией путем прессования полностью соответствует и рекомендован законодательством РФ.
• «БАЛТНЕР®II» - Единственная технология в РФ, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы.
• Оборудование не требует дополнительной дезинфекции и сортировки отходов перед началом цикла переработки.
• Модельный ряд оборудования позволяет решить вопрос с медицинскими отходами в лечебных учреждениях любой мощности и профиля.
• Низкая стоимость оборудования, практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, а также надежность и простота в эксплуатации делает технологию «БАЛТНЕР®II» доступной любым ЛПУ России.
• Ручной залив воды, минимальное электропотребление, а также небольшие габаритные размеры установки, снижают до минимума требования к участку для размещения оборудования, что позволяет использовать технологию «БАЛТНЕР®II» лечебным учреждениям с минимальной площадью.
• Механический пресс характеризуется самым низким уровнем шума, самым низким энергопотреблением, не требует обслуживания, обладает максимальной долговечностью и имеет возможность стопорения и трамбования в нижнем положении для более качественного прессования отходов.
• Наличие принтера для распечатки протокола цикла переработки.

УТИЛИЗАТОРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®-Ш М» (Малый шредер)

Данное оборудование предназначено для переработки медицинских отходов классов Б и В физическим методом обеззараживания (дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума) с механической деструкцией путем измельчения в компактном, мобильном шредере.



Оборудование «БАЛТНЕР®-Ш М» оптимально подходит для:

БАЛТНЕР®-Ш15 М - лабораторий, участковых поликлиник, частных медицинских центров.
БАЛТНЕР®-Ш30 М - небольших ЛПУ таких, как поликлиники, женские консультации, санатории и профилактории, диспансеры и дома инвалидов.
БАЛТНЕР®-Ш50 М - стационаров и крупных диспансеров.
БАЛТНЕР®-Ш100/2 М - крупных стационаров, инфекционных ЛПУ. Два автоклава повышают надежность системы.
БАЛТНЕР®-Ш100 М - крупных многопрофильных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТНЕР®-Ш» КОМПАКТ					
Наименование	**БАЛТНЕР®-Ш15 М**	**БАЛТНЕР®-Ш30 М**	**БАЛТНЕР®-Ш50 М**	**БАЛТНЕР®-Ш100/2 М**	**БАЛТНЕР®-Ш100/2 М**
Объем загрузочной камеры	15 л.	30 л.	50 л.	100 л (2 шт. по 50 л.)	150 л.
Производительность	30 л/ч (4 кг/ч)	60 л/ч (8 кг/ч)	100 л/ч (12 кг/ч)	200 л/ч (24 кг/ч)	300 л/ч (36 кг/ч)
Время цикла дезинфекции	30 мин				
Регистрация цикла дезинфекции	Двойной чек на липкой ленте				
Измельчение	20 л/мин				

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «БАЛТНЕР®-Ш М»:

- Автоклавирование – это единственный метод обезвреживания медицинских отходов не имеющий недостатков. Рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как наиболее эффективный и надёжный. Признан предпочтительным методом на уровне международных стандартов (ЮНЕП 2003). Метод автоклавирования с механической деструкцией путем измельчения в компактном, мобильном шредере полностью соответствует и рекомендован законодательством РФ.
- «БАЛТНЕР®-Ш М» - единственная технология в РФ, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы.
- Оборудование не требует дополнительной дезинфекции и сортировки отходов перед началом цикла переработки.
- Модельный ряд оборудования позволяет решить вопрос с медицинскими отходами в лечебных учреждениях любой мощности и профиля.
- Низкая стоимость оборудования, практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, а также надежность и простота в эксплуатации делает технологию «БАЛТНЕР®-Ш М» доступной любым ЛПУ России.
- Ручной залив воды, минимальное электропотребление, а также небольшие габаритные размеры установки, снижают до минимума требования к участку для размещения оборудования, что позволяет использовать технологию «БАЛТНЕР®-Ш М» лечебным учреждениям с минимальной площадью.
- Компактный мобильный шредер разработан специально для переработки медицинских отходов и оснащен блоком ножей из износостойкой стали повышенной прочности, предназначенным для эксплуатации при экстремальных условиях. Это обеспечивает ножам длительный срок службы.
- Наличие моделей с несколькими камерами дезинфекции позволяет эффективно использовать требуемый для переработки отходов объем, а также обеспечить надежное резервирование для бесперебойной работы оборудования.
- Наличие принтера для распечатки протокола цикла переработки.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®-Ш Б» (Большой шредер)

Данное оборудование предназначено для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В физическим методом обеззараживания (дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума) с механической деструкцией путем измельчения мощнейшим шредером.

Оборудование «БАЛТНЕР®-Ш Б» оптимально подходит для:

БАЛТНЕР®-Ш15 Б - лабораторий, участковых поликлиник, частных медицинских центров.
БАЛТНЕР®-Ш30 Б - небольших ЛПУ таких, как поликлиники, женские консультации, санатории и профилактории, диспансеры и дома инвалидов.
БАЛТНЕР®-Ш50 Б - стационаров и крупных диспансеров.
БАЛТНЕР®-Ш100 Б - крупных стационаров, инфекционных ЛПУ.
БАЛТНЕР II-Ш100 - крупных стационаров, инфекционных ЛПУ.
БАЛТНЕР®II - Ш150 - крупных многопрофильных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ.
БАЛТНЕР®-Ш200 Б - очень крупных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ и центров для централизованной переработки медицинских отходов.
БАЛТНЕР®-Ш300 Б - очень крупных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ и центров для централизованной переработки медицинских отходов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТНЕР®-Ш Б»

Наименование	БАЛТНЕР®-Ш15 Б	БАЛТНЕР®-Ш30 Б	БАЛТНЕР®II-Ш50 Б	БАЛТНЕР®II-Ш100 Б	БАЛТНЕР®II-Ш100	БАЛТНЕР® II-Ш150	БАЛТНЕР®-Ш200 Б	БАЛТНЕР®-Ш300 Б
Объем загрузочной камеры	15 л.	30 л.	50 л.	100 л.	100 л. (2 шт. по 50 л.)	150 л. (3 шт. по 50 л.)	200 л. (2 шт. по 100 л.)	300 л. (2 шт. по 150 л.)
Производительность	30 л/ч (4 кг/ч)	60 л/ч (8 кг/ч)	100 л/ч (12 кг/ч)	200 л/ч (24 кг/ч)	200 л/ч (24 кг/ч)	300 л/ч (36 кг/ч)	400 л/ч (48 кг/ч)	600 л/ч (72 кг/ч)
Время цикла дезинфекции	30 мин							
Регистрация цикла дезинфекции	Двойной чек на липкой ленте							
Измельчение	100 л/мин							

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «БАЛТНЕР®II-Ш»:

• Автоклавирование – это единственный метод обезвреживания медицинских отходов, не имеющий недостатков. Рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как наиболее эффективный и надёжный. Признан предпочтительным методом на уровне международных стандартов (ЮНЕП 2003). Метод автоклавирования с механической деструкцией путем измельчения мощнейшим шредером полностью соответствует и рекомендован законодательством РФ.
• «БАЛТНЕР®II-Ш» - единственная технология в РФ, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы.
• Оборудование не требует дополнительной дезинфекции и сортировки отходов перед началом цикла переработки.
• Модельный ряд оборудования позволяет решить вопрос с медицинскими отходами в лечебных учреждениях любой мощности и профиля.
• Низкая стоимость оборудования, практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, а также надежность и простота в эксплуатации делает технологию «БАЛТНЕР®II-Ш» доступной любым ЛПУ России.
• Ручной залив воды, минимальное электропотребление, а также небольшие габаритные размеры установки, снижают до минимума требования к участку для размещения оборудования, что позволяет использовать технологию «БАЛТНЕР®II-Ш» лечебным учреждениям с минимальной площадью.
• Мощнейший шредер с легкостью перерабатывает все виды медицинских отходов и оснащен блоком ножей из износостойкой стали повышенной прочности, предназначенным для эксплуатации при экстремальных условиях. Это обеспечивает ножам длительный срок службы.
• Наличие моделей с несколькими камерами дезинфекции позволяет эффективно использовать требуемый для переработки отходов объем, а также обеспечить надежное резервирование для бесперебойной работы оборудования.
• Наличие принтера для распечатки протокола цикла переработки.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®-Ш ГОР. Б» (Автоклав с горизонтальной камерой + Большой шредер)

Данное оборудование предназначено для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В физическим методом обеззараживания (дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума) с механической деструкцией путем измельчения мощнейшим шредером.



Оборудование «БАЛТНЕР®-Ш гор. Б» оптимально подходит для:

БАЛТНЕР®-Ш200 гор. Б - очень крупных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ и центров для централизованной переработки медицинских отходов.

БАЛТНЕР®-Ш280 гор. Б - очень крупных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ и центров для централизованной переработки медицинских отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТНЕР®-Ш ГОР. Б»		
Наименование	**БАЛТНЕР®II-Ш200 ПА**	**БАЛТНЕР®II-Ш280 ПА**
Объем загрузочной камеры	200 л.	280 л.
Производительность	400 л/ч (48 кг/ч)	560 л/ч (67 кг/ч)
Время цикла дезинфекции	30 мин	
Измельчение	20 л/мин	
Автоматический архив параметров процесса	наличие	
Бактерицидный HEPA фильтр	наличие	
Встроенный термопринтер	наличие	
Регистрация цикла дезинфекции	двойной чек на липкой ленте	
Регистрация цикла дезинфекции	наличие	

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «БАЛТНЕР®-Ш»:

- Автоклавирование – это единственный метод обезвреживания медицинских отходов, не имеющий недостатков. Рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как наиболее эффективный и надёжный. Признан предпочтительным методом на уровне международных стандартов (ЮНЕП 2003). Метод автоклавирования с механической деструкцией путем измельчения мощнейшим шредером полностью соответствует и рекомендован законодательством РФ.
- «БАЛТНЕР®-Ш» - единственная технология в РФ, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы.
- Оборудование не требует дополнительной дезинфекции и сортировки отходов перед началом цикла переработки.
- Модельный ряд оборудования позволяет решить вопрос с медицинскими отходами в лечебных учреждениях любой мощности и профиля.
- Низкая стоимость оборудования, практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, а также надежность и простота в эксплуатации делает технологию «БАЛТНЕР®-Ш» доступной любым ЛПУ России.
- В вертикальных стерилизаторах ручной залив воды, минимальное электропотребление, а также небольшие габаритные размеры установки, снижают до минимума требования к участку для размещения оборудования, что позволяет использовать технологию «БАЛТНЕР®-Ш» лечебным учреждениям с минимальной площадью.
- Мощнейший шредер с легкостью перерабатывает все виды медицинских отходов и оснащен блоком ножей из износостойкой стали повышенной прочности, предназначенным для эксплуатации при экстремальных условиях. Это обеспечивает ножам длительный срок службы.
- Наличие моделей с несколькими камерами дезинфекции позволяет эффективно использовать требуемый для переработки отходов объем, а также обеспечить надежное резервирование для бесперебойной работы оборудования.
- Наличие принтера для распечатки протокола цикла переработки.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ «БАЛТНЕР®-Ш ПА Н»

Данное оборудование предназначено для переработки медицинских отходов путем дезинфекции насыщенным паром в условиях предварительного вакуума с последующей механической деструкцией путем измельчения. Дезинфекция и деструкция происходят в одной установке. Процесс переработки (обезвреживания) медицинских отходов полностью автоматизирован и не требует ручной перегрузки отходов оператором.

Оборудование «БАЛТНЕР®-Ш ПА Н» оптимально подходит для:

БАЛТНЕР®-Ш200 ПА Н - крупных многопрофильных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ.

БАЛТНЕР®-Ш280 ПА Н - очень крупных стационаров, крупных инфекционных ЛПУ и центров для централизованной переработки медицинских отходов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТНЕР®-Ш ПА Н»		
Наименование	**БАЛТНЕР®-Ш200 ПА Н**	**БАЛТНЕР®-Ш280 ПА Н**
Объем загрузочной камеры	200 л.	280 л.
Производительность	400 л/ч (48 кг/ч)	560 л/ч (67 кг/ч)
Время цикла дезинфекции	30 мин	
Измельчение	100 л/мин	
Автоматический архив параметров процесса	наличие	
Бактерицидный HEPA фильтр	наличие	
Встроенный термопринтер	наличие	
Регистрация цикла дезинфекции	двойной чек на липкой ленте	
Регистрация цикла дезинфекции	наличие	

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «БАЛТНЕР®-Ш ПА Н»:

- Конструктивные и технические характеристики «БАЛТНЕР®-Ш ПА Н» обеспечивают последовательность проведения этапов дезинфекции и деструкции в одной установке и полностью исключают возможность застревания или наматывание отходов на валы ножей.
- По окончании цикла обезвреживания, отходы автоматически попадают в емкость для выгрузки, без участия в процессе персонала, что делает элементарным процесс извлечения переработанных медицинских отходов и гарантирует надежность и безопасность процессов дезинфекции и деструкции.
- Мощнейший шредер с легкостью перерабатывает все виды медицинских отходов и оснащен блоком ножей из износостойкой стали повышенной прочности, предназначенным для эксплуатации при экстремальных условиях. Это обеспечивает ножам длительный срок службы.
- Автоклавирование – это единственный метод обезвреживания медицинских отходов, не имеющий недостатков. Рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как наиболее эффективный и надёжный. Признан предпочтительным методом на уровне международных стандартов (ЮНЕП 2003). Метод автоклавирования с механической деструкцией путем измельчения мощнейшим шредером полностью соответствует и рекомендован законодательством РФ.
- Оборудование не требует дополнительной дезинфекции и сортировки отходов перед началом цикла переработки.
- Модельный ряд оборудования позволяет решить вопрос с медицинскими отходами в лечебных учреждениях любой мощности и профиля.
- Низкая стоимость оборудования, практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, длительный срок службы ножей, а также надежность и простота в эксплуатации, делает технологию «БАЛТНЕР®II-ШПА» доступной любым ЛПУ России.
- «БАЛТНЕР®-Ш ПА Н» - единственная технология в РФ, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы.
- Наличие принтера для распечатки протокола цикла переработки.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

Мы производим уникальный ассортимент пакетов, разработанных для всех моделей установок «БАЛТНЕР®», а также пакетов для сбора, хранения и переработки медицинских отходов, гарантирующих соблюдение законодательства и эпидемиологическую безопасность.



Пакеты «БалтнерПак» для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов класса А

Разработаны для сбора и хранения медицинских отходов.


Цвет	Ширина	Длина
белый	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм



Пакеты «БалтнерПак» для обезвреживания медицинских отходов класса Б и В методом автоклавирования.

Разработаны специально для производимых нами установок «Балтнер®». Пакеты имеют термочувствительную метку, соответствующую температурным режимам обеззараживания. Размер, форма и материал пакетов соответствуют размерам и прочим техническим характеристикам установок.

Цвет		Ширина	Длина
прозрачный	с термометкой на 110°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
прозрачный	с термометкой на 121°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
прозрачный	с термометкой на 134°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм

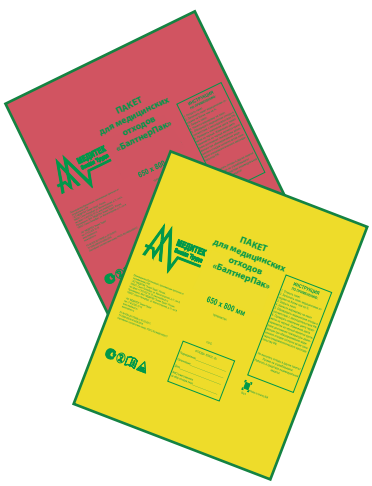

Пакеты «БалтнерПак» для сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования.

Разработаны для сбора и хранения медицинских отходов. Пакеты оснащены термочувствительной меткой, которая меняет цвет при достижении температур 110, 121 и 134°С , что подтверждает проведение дезинфекции медицинских отходов. Таким образом, гарантируется соблюдение законодательства РФ и эпидемиологическая безопасность населения.

Цвет		Ширина	Длина
желтый	с термометкой на 110°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
красный	с термометкой на 110°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
желтый	с термометкой на 121°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
красный	с термометкой на 121°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
желтый	с термометкой а 134°С	от 200 мм д о 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм
красный	с термометкой на 134°С	от 200 мм до 1500 мм	от 300 мм до 2000 мм

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ «БАЛТСТЕР®»

Автоклавы медицинские паровые автоматические форвакуумные «БАЛТСТЕР®», вертикальные и горизонтальные, предназначены для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из твердых материалов (хирургического инструмента из металла, лабораторной посуды из стекла и т.д.) и могут быть использованы в медицинских учреждениях любого масштаба и профиля.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ «БАЛТСТЕР®» – ЭТО:

САМАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РОССИИ

С 2003 года более 5000 лечебных учреждений применяют в повседневной практике стерилизаторы «БАЛТСТЕР®» производства «МЕДИТЕК «Знамя Труда».

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Высококачественное оборудование доступно по цене любым лечебным учреждениям от небольших лабораторий, участковых поликлиник до передовых многопрофильных медицинских центров.

«БАЛТСТЕР®» – РАЗРАБОТАННОЕ И ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НАДЕЖНОЕ И ПРОСТОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система менеджмента качества производства, высокотехнологичные материалы и комплектующие позволили добиться возможности изготовления надежного оборудования обладающего уникальными характеристиками. Минимальные требования к установке и вводу в эксплуатацию оборудования, интуитивно понятный многофункциональный сенсорный дисплей, обеспечивают простоту работы оператора.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Оборудование полностью соответствует Российским и международным нормативам и стандартам качества.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Наши сервисные центры находятся на всей территории России и позволяют в кратчайшие сроки осуществить ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Специалисты сервисного центра в режиме 24/7 готовы оказать поддержку покупателям и пользователям оборудования.
Сервисный центр осуществляет индивидуальный подход к клиентам. На складе всегда в наличии оригинальные запасные части и расходные материалы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Установки «БАЛТСТЕР®» имеют минимальные эксплуатационные затраты, ввиду возможности закупки любых расходных материалов, присутствующих на рынке РФ.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ «БАЛТСТЕР®» НАСТОЛЬНОГО ТИПА

Стерилизаторы паровые автоматические форвакуумные, настольного типа «БАЛТСТЕР® 15» на 23 литра предназначены для проведения стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных изделий медицинского назначения, не чувствительных к воздействию высоких температур, воды или пара.



Оптимальное решение для небольших ЛПУ различного профиля, лабораторий, аптек.



Стерилизационная камера горизонтального расположенния

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объем камеры (литров)	23 л
Задаваемые режимы стерилизации	121°С -20 мин / 126°С -10 мин / 134°С-5 мин.
Температура / время, стерилизации свободного программирования:	Температура - 110 - 134°С / время стерилизации 0-99 мин
Режим сушки	наличие
Регистрация цикла стерилизации	наличие
Бактерицидный HEPA фильтр	наличие
Встроенный термопринтер	наличие
Сетчатые полки для раскладки инструментов	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «БАЛТСТЕР®»:

• Низкая стоимость оборудования, практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, высочайшее качество, надежность и простота в эксплуатации делает стерилизаторы паровые «БАЛТСТЕР®15» доступными любым ЛПУ России.
• Оборудование «БАЛТСТЕР®» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса стерилизации, включая режим сушки и стандартных высокоточных режимов стерилизации с возможностью свободного программирования.
• Дверь с автоматическим механизмом запирания и контролем блокировки обеспечивает высочайшую безопасность производимого нами оборудования.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ «БАЛТСТЕР®» ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА

Стерилизаторы паровые автоматические форвакуумные, вертикального типа «БАЛТСТЕР®» на 30, 50 и 100 литров, предназначены для проведения стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных изделий медицинского назначения, не чувствительных к воздействию высоких температур, воды или пара.

Оптимальное решение для поликлиник, диспансеров, медицинских центров и стационаров различного профиля.



Выносной блок управления со встроенным сенсорным экраном и принтером



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТСТЕР®»	
Объем камеры (литров)	30 / 50 / 100
Задаваемые режимы стерилизации	121°С -20 мин / 126°С -10 мин / 134°С-5 мин.
Температура / время, стерилизации свободного программирования:	Температура - 110 - 134°С / время стерилизации 0-99 мин
Режим сушки	наличие
Регистрация цикла стерилизации	наличие
Бактерицидный HEPA фильтр	наличие
Встроенный термопринтер	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ «БАЛТСТЕР®»:

• Низкая стоимость, высочайшее качество и практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, делает стерилизаторы паровые «БАЛТСТЕР®» доступными любым ЛПУ России.
• Наличие выписки из Реестра Российской Промышленной Продукции (В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875).
• Широкий модельный ряд паровых стерилизаторов с объемом камер от 30 до 100 литров закрывает любые потребности ЛПУ в вертикальных паровых стерилизататоров.
• Выносной блок управления, уникальное программное обеспечение и интуитивно понятный многофункциональный интерфейс обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.
• Паровые стерилизаторы «БАЛТСТЕР®» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса стерилизации, включая режим сушки и стандартных высокоточных режимов стерилизации с возможностью свободного программирования.
• Ручная блокировка закрытия двери с надежным усиленным запирающим механизмом, обеспечивает высочайшую безопасность производимого нами оборудования.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ «БАЛТСТЕР®Б» ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА, НЕПРОХОДНЫЕ

БАЛТСТЕР®Б-100-Д1 / БАЛТСТЕР®Б-200-Д1 / БАЛТСТЕР®Б-280-Д1 БАЛТСТЕР®Б-300-Д1 / БАЛТСТЕР®Б-400-Д1 / БАЛТСТЕР®Б-600-Д1 / БАЛТСТЕР®Б-700 / Д1 БАЛТСТЕР®Б-800 Д1

Стерилизаторы паровые автоматические форвакуумные горизонтальные непроходные «БАЛТСТЕР®Б» на 100, 200, 280, 300, 400, 600, 700, 800 литров предназначены для проведения стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных изделий медицинского назначения, не чувствительных к воздействию высоких температур, воды или пара.



Оптимальное решение для стационаров любого профиля и мощности, от районных стационаров до передовых многопрофильных медицинских центров.



Интуитивно понятный модуль управления со встроенным принтером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТСТЕР®-Б»	
Объем камеры (литров)	100 / 200 / 280 / 300 / 400 / 600 / 700 / 800
Задаваемые режимы стерилизации	121°С -20 мин / 126°С -10 мин. / 134°С-5 мин.
Температура / время, стерилизации свободного программирования:	Температура - 110 - 134°С / время стерилизации 0-99 мин
Режим сушки	наличие
Регистрация цикла стерилизации	наличие
Автоматический архив параметров процесса стерилизации	наличие
Бактерицидный HEPA фильтр	наличие
Встроенный термопринтер	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НЕПРОХОДНЫХ ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ «БАЛТСТЕР®Б»:


• Низкая стоимость, высочайшее качество и практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, делает стерилизаторы паровые «БАЛТСТЕР®-Б» доступными любым ЛПУ России.
• Широкий модельный ряд стерилизаторов с объемом камер от 100 до 800 литров закрывает любые потребности ЛПУ в горизонтальных стерилизаторах.
• Уникальное программное обеспечение и интуитивно понятный многофункциональный интерфейс обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.
• Оборудование «БАЛТСТЕР®-Б» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса стерилизации, включая режим сушки и стандартных высокоточных режимов стерилизации с возможностью свободного программирования.
• Производимое нами оборудование оснащено мощнейшим парогенератором, вакуумным насосом, а также дополнительной оболочкой - «паровой рубашкой», что обеспечивает интенсивную эксплуатацию оборудования и гарантированный процесс стерилизации.
• Распашная дверь с надежным усиленным запирающим устройством с автоматическим механизмом закрытия и контролем блокировки, обеспечивает высочайшую безопасность оборудования.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОХОДНОГО ТИПА «БАЛТСТЕР®Б »

БАЛТСТЕР®Б-100-Д2 / БАЛТСТЕР®Б-200-Д2 / БАЛТСТЕР®Б-280-Д2 БАЛТСТЕР®Б-300-Д2 / БАЛТСТЕР®Б-400-Д2 БАЛТСТЕР®Б-600-Д2 / БАЛТСТЕР®Б-700 Д2 / БАЛТСТЕР®Б-800 Д2

Стерилизаторы паровые автоматические форвакуумные горизонтальные проходного типа «БАЛТСТЕР®Б» на 100, 200, 280, 300, 400, 600, 700, 800 литров предназначены для проведения стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных изделий медицинского назначения, не чувствительных к воздействию высоких температур, воды или пара.

Оптимальное решение для стационаров любого профиля и мощности от районных стационаров до передовых многопрофильных медицинских центров. Паровые стерилизаторы позволяют эффективно организовать зонирование технологического процесса в ЦСО.

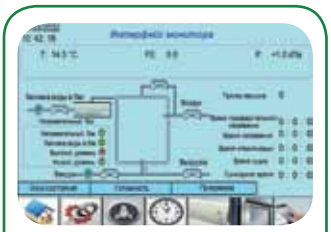

Удобный и информативный интерфейс монитора, который ото-бражает данные процесса стерилизации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТСТЕР®»	
Объем камеры (литров)	100 / 200 / 280 / 300 / 400 / 600 / 700 / 800
Задаваемые режимы стерилизации	121°С -20 мин / 126°С -10 мин. / 134°С-5 мин.
Температура / время, стерилизации свободного программирования:	Температура - 110 - 134°С / время стерилизации 0-99 мин
Режим сушки	наличие
Регистрация цикла стерилизации	наличие
Автоматический архив параметров процесса стерилизации	наличие
Бактерицидный HEPA фильтр	наличие
Встроенный термопринтер	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОХОДНЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ПАРОВЫХ «БАЛТСТЕР®Б»:

- Низкая стоимость, высочайшее качество и практически полное отсутствие эксплуатационных затрат, делает стерилизаторы паровые «БАЛТСТЕР®Б» доступными любым ЛПУ России.
- Широкий модельный ряд стерилизаторов с объемом камер от 100 до 800 литров и проходной тип оборудования предполагает организацию зонирования стерилизационного отделения и закрывает любые потребности ЛПУ в горизонтальных стерилизаторах.
- Уникальное программное обеспечение и интуитивно понятный многофункциональный интерфейс обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.
- Оборудование «БАЛТСТЕР®Б» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса стерилизации, включая режим сушки и наличия стандартных высокоточных режимов стерилизации с возможностью свободного программирования.
- Производимое нами оборудование оснащено мощнейшим парогенератором, вакуумным насосом, а также дополнительной оболочкой - «паровой рубашкой», что обеспечивает интенсивную эксплуатацию оборудования и гарантированный процесс стерилизации.
- Проходной тип оборудования позволяет эффективно организовать процесс перехода изделий из чистой в стерильную зону ЦСО.
- Распашная дверь с надежным усиленным запирающим устройством с автоматическим механизмом закрытия и контролем блокировки, обеспечивает высочайшую безопасность оборудования.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПЛАЗМЕННЫЕ «БАЛТСТЕР®»

БАЛТСТЕР®-60 / БАЛТСТЕР®-100 / БАЛТСТЕР®-130 / БАЛТСТЕР®-220

Стерилизаторы плазменные «БАЛТСТЕР®» являются высокоэффективным и доступным решением для стерилизации широкого спектра термолабильных инструментов и материалов, используемых в ЛПУ, таких как: оптические медицинские системы, электрические кабели, жесткие и гибкие эндоскопы, ультразвуковые медицинские инструменты, датчики, импланты и инструменты для их установки.



Оптимальное решение для стационаров любого профиля и передовых многопрофильных медицинских центров, в практике применения которых высококачественный медицинский инструмент, требующей самой деликатной стерилизации.

ФУНКЦИИ:

- Создание в вакуумной камере с парами пероксида водорода биоцидной плазменной среды.
- Стерилизация изделий осуществляется в парах стерилизующего средства с последующим возбуждением низкотемпературной плазмы.
- Плавное снижение давление осуществляется с помощью специального вакуумного насоса. Плазма удерживается в камере в течение всей стерилизационной фазы.
- Возбуждение плазмы - это несложный процесс, который мало зависит от вида стерилизуемого материала (метал, керамика, стекло или пластмасса).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТСТЕР®»	
Полезный объем камеры (литров)	50 / 85 / 108 / 155
Питание от сети	220 В
Температура / время цикла стерилизации	не более 55°С / 40-70 мин
Тип дверей	Распашные или слайдовые
Режимы работы	Стандартный и усиленный
Регистрация цикла стерилизации	наличие
Автоматический архив параметров процесса стерилизации	наличие
Встроенный термопринтер	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕРИЛИЗАТОРОВ ПЛАЗМЕННЫХ «БАЛТСТЕР®»:

- Низкая стоимость, высочайшее качество и минимальные эксплуатационные затраты, делают стерилизаторы «БАЛТСТЕР®» доступными любым ЛПУ России.
- Широкий модельный ряд с объемом камер от 50 до 155 литров закрывает любые потребности ЛПУ.
- Метод плазменной стерилизации позволяет в сухой атмосфере при температуре не более 55°С стерилизовать практически всю номенклатуру изделий медицинского назначения. Особенно эффективно применение данного метода для стерилизации изделий из термолабильных материалов и материалов, склонных к активной коррозии.
- Уникальное программное обеспечение и интуитивно понятный многофункциональный интерфейс обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.
- Оборудование «БАЛТСТЕР®» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса стерилизации и наличия стандартных высокоточных режимов стерилизации с возможностью свободного программирования.
- Распашная /слайдовая дверь с надежным усиленным запирающим устройством с автоматическим механизмом закрытия и контролем блокировки, обеспечивает высочайшую безопасность оборудования.

МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНЫЕ «БАЛТКЛЕР®»

МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНЫЕ «БАЛТКЛЕР®» предназначены для мойки и дезинфекции различных медицинских изделий многократного использования (хирургических инструментов и лабораторной посуды). Обеспечивают бережную обработку, высокое качество очистки и удобство работы для персонала. Разработаны на основе передовых технологических решений, соответствуют российским и мировым стандартам качества, имеют Регистрационное удостоверение установленного образца.

МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНЫЕ «БАЛТКЛЕР®» - ЭТО:

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ
Высокое качество, доступная цена и лидирующие позиции на рынке оборудования «БАЛТКЛЕР®» обеспечивается благодаря сформированной десятилетиями производственной культуре, технологиям и тщательному контролю производственного процесса.

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уникальное программное обеспечение и интуитивно понятный многофункциональный интерфейс обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПАЦИЕНТОВ
Автоматическая мойка инструментов позволяет провести качественный процесс дезинфекции в полном соответствии с современными требованиями действующего законодательства. Гарантированная дезинфекция инструментов исключает ошибки ручного труда и сводит к минимуму инфицирование персонала и пациентов. Применение в ежедневной практике Дезинфекционно-моечных машин «БАЛТКЛЕР®» позволяет медицинской организации поддерживать высочайший уровень безопасности.

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Применение дезинфекционно-моечных машин «БАЛТКЛЕР®» обеспечивают бережную обработку инструментов, что значительно продлевает срок их службы, и в сочетании с минимальными эксплуатационными затратами, делают применение дезинфекционно-моечных машин экономически оправданными.

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Широкий модельный ряд оборудования закрывает любые потребности ЛПУ в дезинфекционно-моечных машинах.

МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНЫЕ «БАЛТКЛЕР®» НЕПРОХОДНОГО ТИПА

«БАЛТКЛЕР®-120-Д1-220В» / «БАЛТКЛЕР®-220-Д1-380В» «БАЛТКЛЕР®-320-Д1-380В»

Машины дезинфекционно-моечные «БАЛТКЛЕР®» обеспечивают бережную обработку и высококачественную очистку медицинских изделий, удобство работы для персонала и экономию бюджетных средств лечебного учреждения. Оборудование «БАЛТКЛЕР®», является неотъемлемой частью любого современного центрального стерилизационного отделения (ЦСО) больницы за счет доступной цены и высочайшего качества оборудования.



Оптимальное решение для стационаров любого профиля и мощности от районных стационаров до передовых многопрофильных медицинских центров.





Широкий спектр функциональных стоек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТКЛЕР®»	
Объем камеры (литров)	144 / 205 / 260
Питание от сети	220 В или 380 В
Тип исполнения	Не проходной
Тип дверей	Распашные или слайдовые
Температура / время цикла дезинфекции	От 1 до 93°С / до 80 мин
Встроенные программы	до 12 шт.
Регистрация цикла дезинфекции	наличие
Автоматический архив параметров процесса	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНОЙ «БАЛТКЛЕР®»:

- Низкая стоимость, экономия бюджетных средств и высочайшее качество оборудования, делают машины дезинфекционно-моечные «БАЛТКЛЕР®» доступными и выгодными любым ЛПУ.
- Минимальные эксплуатационные затраты за счет низкого энергопотребления и высокоточной настройки дозирования моющего средства.
- Широкий модельный ряд моек с объемом камер от 144 до 260 литров закрывает любые потребности ЛПУ в дезинфекционно-моечных машинах.
- Уникальное программное обеспечение, интуитивно понятный многофункциональный интерфейс, а также широкий спектр производимых нами стоек для мойки разнообразных медицинских и лабораторных изделий и тележек для облегчения загрузки и выгрузки обрабатываемых материалов обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.
- Оборудование «БАЛТКЛЕР®» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса мойки на всех этапах, включая режим сушки, наличия стандартных высокоточных режимов мойки с возможностью свободного программирования, а также пользователь может задавать названия и сохранять до 99 программ.
- Распашная дверь с надежным усиленным запирающим устройством с автоматическим механизмом закрытия и контролем блокировки, обеспечивает высочайшую безопасность оборудования.

МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНЫЕ «БАЛТКЛЕР®» ПРОХОДНОГО ТИПА

«БАЛТКЛЕР®-220-Д2-380В» / «БАЛТКЛЕР®-320-Д2-380В» «БАЛТКЛЕР®-420-Д2-380В»

Машины дезинфекционно-моечные «БАЛТКЛЕР®» обеспечивают бережную обработку и высококачественную очистку медицинских изделий, удобство работы для персонала и экономию бюджетных средств лечебного учреждения. Оборудование «БАЛТКЛЕР®», является неотъемлемой частью любого современного центрального стерилизационного отделения (ЦСО) больницы за счет доступной цены и высочайшего качества оборудования.

Оптимальное решение для стационаров любого профиля и мощности от районных стационаров до передовых многопрофильных медицинских центров. Проходные мойки позволяют эффективно организовать зонирование технологического процесса в ЦСО.





Широкий спектр функциональных стоек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАЛТКЛЕР®»	
Объем камеры (литров)	205 / 260 / 310
Питание от сети	380 В
Тип исполнения	Проходной
Тип дверей	Распашные или слайдовые
Температура / время цикла дезинфекции	От 1 до 93°С / до 80 мин
Встроенные программы	до 12 шт.
Регистрация цикла дезинфекции	наличие
Автоматический архив параметров процесса	наличие
USB-порт для переноса данных	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-МОЕЧНОЙ «БАЛТКЛЕР®»:

- Низкая стоимость, экономия бюджетных средств и высочайшее качество оборудования, делает машины дезинфекционно-моечные «БАЛТКЛЕР®» доступными и выгодными любым ЛПУ.
- Минимальные эксплуатационные затраты за счет низкого энергопотребления и высокоточной настройки дозирования моющего средства.
- Широкий модельный ряд моек с объемом камер от 205 до 310 литров закрывает любые потребности ЛПУ в дезинфекционно-моечных машинах.
- Уникальное программное обеспечение, интуитивно понятный многофункциональный интерфейс, а также широкий спектр производимых нами стоек для мойки разнообразных медицинских и лабораторных изделий и тележек для облегчения загрузки и выгрузки обрабатываемых материалов обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.
- Оборудование «БАЛТКЛЕР®» соответствует высочайшим международным стандартам качества ввиду наличия автоматического контроля процесса мойки на всех этапах, включая режим сушки, наличия стандартных высокоточных режимов мойки с возможностью свободного программирования, а также пользователь может задавать названия и сохранять до 99 программ.
- Проходной тип оборудования позволяет эффективно организовать процесс перехода изделий из грязной в чистую зону ЦСО.
- Распашная дверь с надежным усиленным запирающим устройством с автоматическим механизмом закрытия и контролем блокировки, обеспечивает высочайшую безопасность оборудования.

ШКАФ ВОДОПОДГОТОВКИ «БАЛТКЛЕР®» ДЛЯ АВТОКЛАВОВ И ДЕЗИНФЕКЦИОННО - МОЕЧНЫХ МАШИН

«МЕДИТЕК «Знамя Труда» разработал и внедрил в повседневную практику лечебных учреждений системы получения очищенной воды «БАЛТКЛЕР®». Системы водоподготовки «БАЛТКЛЕР®» поддерживают эффективность технологического процесса, обеспечивают надёжность и продлевают срок эксплуатации оборудования.



Оптимальное решение для стационаров любого профиля и мощности от районных стационаров до передовых многопрофильных медицинских центров.



Универсальный размер фильтрующих элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА ВОДОПОДГОТОВКИ «БАЛТКЛЕР®»	
Производительность (литров/час)	До 400
Питание от сети	220 В
Габаритные размеры	600 x 530 x 1280
Количество мембран (шт)	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Максимальное давление (атм.)	7
Диаметр подключения трубопровода	½ дюйма
Картриджи с активированным углем	наличие

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ «БАЛТКЛЕР®»


- Низкая стоимость, экономия бюджетных средств и высочайшее качество оборудования, делают водоподготовку «БАЛТКЛЕР®» доступной и выгодной любым ЛПУ.
- Водоподготовка «БАЛТКЛЕР®» обеспечивает качественное выполнение процесса стерилизации и дезинфекции медицинских изделий благодаря осмотической очистке воды в соответствии с требованиями СанПин 3.3686-21.
- Гораздо более длительный срок, в сравнении с аналогами, выработки ресурса дорогостоящих антибактериальных фильтров благодаря встроенной насосной станции, которая обеспечивает повышение давления подаваемого в систему воды до 5,5 бар.
- Минимальные эксплуатационные затраты, за счет снижения затрат на расходные материалы благодаря применению отечественных картриджей, фильтров увеличенного размера и повышенной емкости.
- Интуитивно понятное управление, обеспечивает простую, удобную и надежную эксплуатацию оборудования.


МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ЦСО «БАЛТСТЕР®» И МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ-УЧАСТОК «БАЛТНЕР®»

Модульные здание-участок «БАЛТНЕР®» и здание ЦСО «БАЛТСТЕР®» – это созданные нами типовые проекты зданий участка по обращению с медицинскими отходами «БАЛТНЕР®» и центрального стерилизационного отделения «БАЛТСТЕР®» для ЛПУ с ограниченной площадью, цена которых сопоставима с затратами учреждения на ремонт существующих помещений.
Модульные здания – это технологичное, современное и быстровозводимое решение для создания участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В и для организации центрального стерилизационного отделения.
Модульные здание-участок «БАЛТНЕР®» и здание ЦСО «БАЛТСТЕР®» организованы в строгом соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами и ГОСТами. В зависимости от профиля и мощности ЛПУ модульные здания имеют различные типоразмеры.
Модули могут быть как внешние, так и инсталлируемые в существующие помещения ЛПУ.





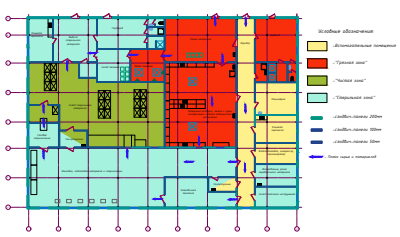

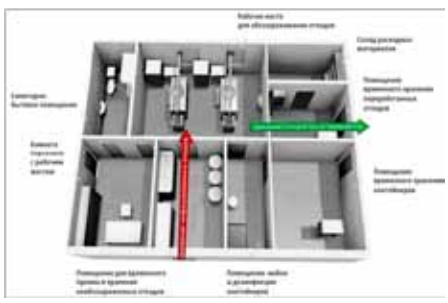



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Модульные здания отличаются доступной ценой, сопоставимой с затратами лечебно-профилактического учреждения на ремонт существующих помещений.
- Конструктивные и планировочные решения, обеспечивают поточность технологического процесса в строгом соответствии с действующими нормативами и обеспечивают комфортную, экологически и эпидемиологически безопасную работу персонала.
- Технологичный дизайн и материалы внутренней отделки обеспечивают требуемый уровень чистоты при эксплуатации, а также стойкость к обработке дезинфицирующими средствами.
- Модульные здания подключаются к существующим инженерным сетям ЛПУ и не требуют дополнительного согласования в контролирующих органах.
- В ЛПУ, где отсутствует помещение для организации участка ЦСО или обращения с медицинскими отходами, наше модульное здание является готовым решением «под ключ».
- Технологичное и быстровозводимое модульное здание позволяет в кротчайшие сроки решить вопрос организации ЦСО или участка по обращению с медицинскими отходами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ









Вспомогательные изделия для стерилизации и дезинфекции — это изделия, которые помогают оптимизировать процессы обработки инструментов, материалов и поверхностей.
Они включают в себя тележки, корзины, биксы, стойки для мойки и другие предметы.

Эти изделия помогают эффективно организовать пространство, перемещения инструментов
и материалов, а также обеспечивают полную санацию и доступ дезинфицирующего или стерилизующего агента во время обработки к медицинским изделиям.

Использование вспомогательных изделий позволяет повысить качество стерилизации и дезинфекции, снизить риск ошибок и обеспечить безопасность персонала.



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11А
г. Москва, ул. Новослободская, 26, стр.1

телефон: +7 (812) 622-10-15
телефон: +7 (812) 334-79-73

e-mail: info@meditecZT.ru

www.meditecZT.ru
сайт компании

www.baltner.ru
Балтнер.рф
производство утилизаторов медицинских отходов